



Canules nasales

Une gamme de canules nasales, pour l'adulte, l'enfant et le nouveau-né



Oxygénothérapie ▪ Canules nasales

Canules nasales

Canules nasales classiques

Une gamme conçue pour l'adulte, l'enfant ou le nouveau-né disponible dans un large choix de formes d'embouts pour convenir aux besoins de chaque patient. Chaque tubulure à oxygène est pourvue d'une lumière interne étoilée, permettant de maintenir le débit d'oxygène même en cas de plicature.

Egalement disponibles en version Satin


Comparées aux canules standards, les canules en matière satinée souple d'Intersurgical ont prouvé lors de tests une réduction de 20% de la friction⁽¹⁾ sur le visage et les oreilles du patient.

Formes des embouts

Les canules nasales sont déclinées selon les formes suivantes d'embout :




▶ Vidéo disponible sur www.intersurgical.fr

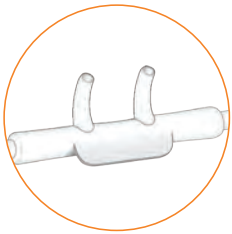


Courbes :

Forme anatomique pour un ajustement confortable

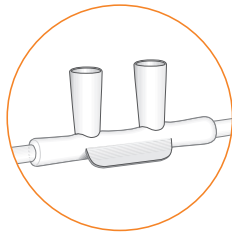


Evasés :

Atténuent le débit d'oxygène en sortie d'embouts

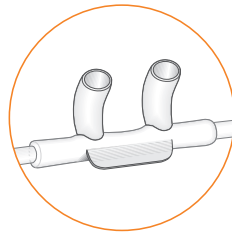

Courbes et évasés :

Combinent les avantages de chacun

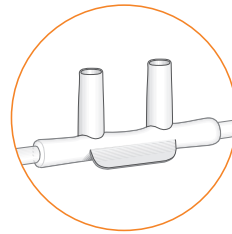

Droits :

Forme traditionnelle



Courbes avec mousse de protection :

Amélioration de l'ajustement anatomique et du confort du patient

Canules nasales avec protections d'oreilles

Une gamme équipée de coussinets souples en mousse de silicone, non amovibles et aisément ajustables, afin de prévenir l'ulcération des oreilles du patient.



Canules nasales sans phtalates

La gamme de canules nasales sans phtalates a été conçue pour répondre à la réglementation sur l'exposition au DEHP du nouveau-né nécessitant des soins intensifs en service de néonatalogie.





Tuyau oxygène à lumière interne étoilée

Permet de maintenir le débit d'oxygène même en cas de plicature du tuyau

Bague anti-glisse

Permet à l'utilisateur d'adapter la longueur de la boucle pour un ajustement optimal

Sans latex

Pour prévenir le risque d'allergies

Matière transparente

Discrète et facilite la détection d'obstruction

(également disponible en matière Satin à faible friction)

Positionnement sur les oreilles

Stabilité et sécurité

(protections d'oreilles disponibles pour un confort accru)

Embouts souples


Minimisent l'irritation

Languette de maintien

Aide au positionnement optimum des embouts

Versions courtes sans tuyau
Idéales pour une utilisation au domicile

Gamme de canules nasales adultes

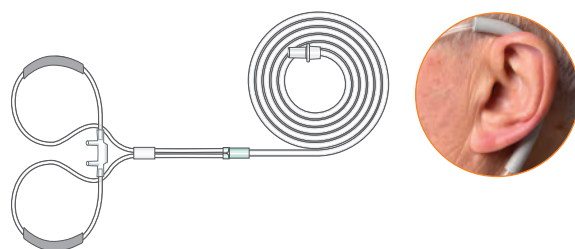

1165002

| Référence | Description | Longueur | Qté/bte |
|-----------|--|----------|---------|
| 1161000 | Canule nasale adulte, embouts droits et tuyau | 1.8m | 50 |
| 1161004 | Canule nasale adulte, embouts droits et tuyau | 2.1m | 50 |
| 1162000 | Canule nasale adulte, embouts droits et tuyau | 5m | 20 |
| 1169000 | Canule nasale adulte, embouts droits, sans tuyau (à utiliser avec une rallonge) | 0.5m | 100 |
| 1165000 | Canule nasale adulte, embouts courbes et tuyau | 1.8m | 50 |
| 1161020 | Canule nasale Satin adulte, embouts droits et tuyau | 1.8m | 50 |
| 1165020 | Canule nasale Satin adulte, embouts courbes et tuyau | 1.8m | 50 |
| 1165002 | Canule nasale adulte, embouts courbes, tuyau et protections d'oreilles | 2.1m | 50 |
| 1165003 | Canule nasale adulte, embouts courbes, tuyau et protections d'oreilles | 5m | 40 |
| 1165021 | Canule nasale Satin adulte, embouts courbes et tuyau | 2.1m | 50 |
| 1161021 | Canule nasale Satin adulte, embouts droits et tuyau | 2.1m | 50 |
| 1166000 | Canule nasale adulte, embouts évasés et tuyau | 1.8m | 50 |
| 1167000 | Canule nasale adulte, embouts courbes/évasés et tuyau | 1.8m | 50 |
| 1168000 | Canule nasale adulte, embouts courbes/évasés sans tuyau (à utiliser avec une rallonge) | | 100 |

Faire une demande

Gamme de canules nasales pédiatriques et néonatales

| Référence | Description | Longueur | Qté/bte |
|-----------|---|----------|---------|
| 1163000 | Canule nasale pédiatrique, embouts courbes et tuyau | 2.1m | 50 |
| 1164000 | Canule nasale néonatale, embouts courbes et tuyau | 2.1m | 50 |

Faire une demande

Gamme de canules nasales néonatales sans phtalates

| Référence | Description | Longueur | Qté/bte |
|-----------|---|----------|---------|
| 1160002 | Canule nasale pour nourrisson, embouts courbes et tuyau | 2.1m | 50 |
| 1160001 | Canule nasale pour nourrisson, embouts courbes et tuyau | 2.1m | 50 |
| 1160000 | Canule nasale pour prématuré, embouts courbes et tuyau | 2.1m | 50 |

Faire une demande

option sans phtalates pour prématuré, nouveau-né et nourrisson



33, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Le Péripole, 94127 Fontenay Sous Bois Cedex
 T: +33 (0)1 48 76 72 30 F: +33 (0)1 48 76 91 38 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié ISO 9001:2015, ISO 13485:2003 et ISO 14001:2015

Pensez-y avant d'imprimer
 Economisons les ressources.
 Si vous devez imprimer ce document, faites-le recto verso.

IS10.8 FR • Issue 9 04.18